


Ipsos Cast – pour un modelage de plâtre efficace et ajusté

Le dispositif Ipsos Cast vous permet de gagner du temps lors de la confection d'une emboîture de prothèse transtibiale et d'améliorer en même temps sa qualité. Cette nouvelle technologie se compose d'une gaine tressée à tissage biaxial emboîtée sur l'appareil pour plâtre Ottobock au moyen d'un adaptateur. De par sa structure spécifique, la gaine tressée simule pendant la prise d'empreinte en plâtre la pression appropriée qui s'exerce ultérieurement dans l'emboîture. L'orthoprothésiste peut directement intervenir au cours de la prise d'empreintes et générer une pression supplémentaire à certains endroits. Il peut ainsi obtenir une empreinte optimisée permettant de couler un modèle en plâtre ajusté. Ipsos Cast peut nettement réduire le temps consacré à la confection d'une emboîture test. Les utilisateurs disposent dans le même temps d'une emboîture ajustée pour plus de sécurité, de confort de port ainsi que des séquences de mouvements plus physiologiques.

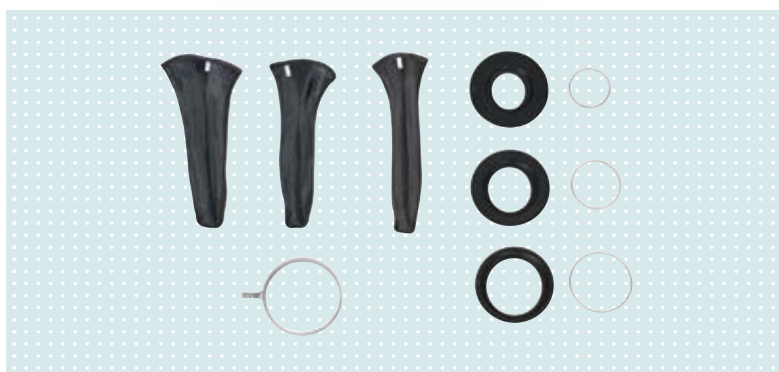

Aperçu des avantages

- Gain de temps lors du modelage de plâtre d'une emboîture de prothèse TT
- Qualité supérieure grâce à la simulation des rapports de pression dans l'emboîture ultérieure
- Optimisation des détails grâce à une intervention directe au cours de la prise d'empreintes en plâtre

743G15 Ipsos Cast

Référence	743G15
Dimensions de la bague de retenue ØxH	255 mm x 35 mm
Pour	Pour un montage sur l'appareil pour plâtre Ottobock 743A11
Utilisation pour	Prise d'empreintes en négatif avec poids du corps transféré afin de fabriquer une emboîture TT.
Contenu de la livraison	1 adaptateur pour le raccordement à l'appareil pour plâtre Ottobock 743A11, 3 anneaux de maintien pour tube de prise d'empreintes (Ø 110 mm, Ø 140 mm, Ø 180 mm), 1 tube de prise d'empreintes 743Y760=90 (Ø 90 mm), 1 tube de prise d'empreintes 743Y760=110 (Ø 110 mm), 1 tube de prise d'empreintes 743Y760=140 (Ø 140 mm)

743Y760=* Tube de prise d'empreintes

Référence	743Y760=90	743Y760=110	743Y760=140
Pour	743G15 Ipsos Cast		
Diamètre	90 mm	110 mm	140 mm
Matériau	Polyamide		



Plus d'informations sur:
pe.ottobock.com/fr/743G15.html